

## Stanovení koncentrace kalprotektinu ve stolici u nemocných s idiopatickými střevními záněty - srovnání dvou komerčních testů

Maličková K.<sup>1</sup>, Janatková I.<sup>1</sup>, Bortlík M.<sup>2,3</sup>, Komárek V.<sup>2</sup>, Lukáš M.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze

<sup>2</sup>Klinické a výzkumné centrum pro idiopatické střevní záněty ISCARE IVF a 1. LF UK v Praze

<sup>3</sup>Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1.LF UK v Praze

### Souhrn

**Úvod:** Vyšetření fekálního kalprotektinu je neinvazivní, jednoduchá, časově i finančně nenáročná diagnostická metoda, sloužící k odlišení funkčních poruch zažívacího ústrojí od zánětem provázeného organického postižení a k predikci hrozícího relapsu nespecifického střevního zánětu. V posledním roce se objevily komerčně dostupné diagnostické soupravy, využívající monoklonálních nebo polyklonálních protilátek proti heterodimerickému komplexu kalprotektinu k detekci koncentrace fekálního kalprotektinu metodou enzymové imunoanalýzy (ELISA).

**Cíl práce:** Srovnání dvou ELISA metod stanovení fekálního kalprotektinu, které se navzájem liší použitou protilátkou (monoklonální versus polyklonální).

**Materiál a metodiky:** Byly studovány ELISA soupravy Calprotectin ELISA (Bühlmann, Bazilej, Švýcarsko), ve které je použita monoklonální protilátka, a PhiCal™ Calprotectin ELISA (R-Biopharm, Darmstadt, Německo) využívající polyklonální protilátku proti kalprotektinu. Vyšetřili jsme eluáty stolice nemocných s Crohnovou nemocí (CN, n = 36), ulcerózní kolitidou (UC, n = 29) a kontrolní vzorky, kterými byly eluáty stolice zdravých osob (n = 98). Analýzou získaných dat byly pomocí softwaru Statistica CZ 8.0 (Statsoft, Tulsa, USA) stanoveny parametry variability měření (linearita, opakovatelnost, stabilita), senzitivita a specifická testů a bylo provedeno srovnání metod.

**Výsledky:** Obě studované soupravy vykázaly velmi uspokojivé hodnoty přesnosti stanovení (intra- a inter-assay < 10%). Dilučním testem linearit byly prokázány lepší hodnoty u soupravy firmy Bühlmann, a to zejména u vysokých koncentrací kalprotektinu. Výsledky získané dvěma metodami navzájem uspokojivě korelovaly: Pearsonův korelační koeficient  $r = 0,83$ , limitní difference podle Blanda-Altmana se pohybovaly v rozmezí -17% až 30%. Diagnostická senzitivita testů byla 79 % pro soupravu Calprotectin ELISA Bühlmann a 74 % pro soupravu Calprotectin ELISA R-Biopharm, specifická 87 % pro soupravu Calprotectin ELISA Bühlmann a 84 % pro soupravu Calprotectin ELISA R-Biopharm.

**Závěry:** Obě studované soupravy mají dobré a srovnatelné parametry měření, u testu využívající monoklonální protilátky proti kalprotektinu jsme zjistili vyšší hodnoty senzitivity a specifity. Dostupnost, citlivost a výkonnost ELISA testů fekálního kalprotektinu lze dobře využít v klinické praxi.

**Klíčová slova:** fekální kalprotektin - idiopatické střevní záněty - ELISA - monoklonální protilátka - polyklonální protilátka.

### Summary

**Maličková K., Janatková I., Bortlík M., Komárek V., Lukáš M.: Fecal Calprotectin Levels in Patients with Idiopathic Inflammatory Bowel Disease – Comparison of Two Commercial Tests**

**Background:** Fecal calprotectin test is a simple, non-invasive, rapid and inexpensive diagnostic tool allowing differentiation between GIT functional disorders and inflammatory conditions and relapse prediction in non-specific inflammatory bowel disease. In the last year, commercially available ELISA diagnostic kits, using either monoclonal or polyclonal antibodies against a heterodimeric complex, calprotectin, for the detection of fecal calprotectin, started to be marketed.

**Objective:** To compare two ELISA kits for the detection of fecal calprotectin differing from each other in the used type of antibody (monoclonal versus polyclonal).

**Material and Methods:** Two ELISA kits were assessed: Calprotectin ELISA (Bühlmann, Basel, Switzerland) using a monoclonal antibody against calprotectin and PhiCal™ Calprotectin ELISA (R-Biopharm, Darmstadt, Germany) using a polyclonal antibody against calprotectin. We analyzed fecal eluates from patients with Crohn's disease (CD, n = 36) and ulcerous colitis (UC, n = 29) and from healthy controls (n = 98). Data were analyzed using software Statistica CZ 8.0 (Statsoft, Tulsa,

USA) and measurement variability parameters (linearity, repeatability, stability) and test sensitivity and specificity were established and the methods were compared.

**Results:** The two kits showed adequate accuracy (intra- and inter-assay variation < 10%). The dilution linearity test indicated superiority of the Calprotectin ELISA Bühlmann kit, in particular for high calprotectin levels. The results of the two methods showed good correlation: Pearson's correlation coefficient  $r = 0,83$ , limit difference according to Bland-Altman plot ranged from 17% to 30%. Diagnostic sensitivity rates were 79 % for the Calprotectin ELISA Bühlmann kit and 74 % for the Calprotectin ELISA R-Biopharm kit, the test specificity rates were 87 % and 84 %, respectively. **Conclusions:** Both of the tested kits have comparably good measurement parameters, the Bühlmann kit using monoclonal antibody against calprotectin showed higher sensitivity and specificity. In view of their availability, sensitivity and performance, the fecal calprotectin ELISA kits are helpful diagnostic tools for clinical practice.

**Key words:** fecal calprotectin – idiopathic intestinal inflammation – ELISA – monoclonal antibody – polyclonal antibody.

Idiopatické střevní záněty (inflammatory bowel disease, IBD) jsou chronická zánětlivá onemocnění, postihující primárně tenké a/nebo tlusté střevo. Nejdůležitějšími představiteli této medicínsky i socioekonomicky významné skupiny chorobných stavů jsou Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.

V uplynulých letech došlo k významnému pokroku v objasnění imunologických pochodů, souvisejících se vznikem a vývojem IBD. Dosud však není zcela jasné, zda jsou chronické zánětlivé změny střevní stěny u IBD vyvolány patologickou imunitní odpovědí vůči normálním antigenům ve střevě, nebo zda jde spíše o primárně správnou reakci imunitního systému proti dosud neznámému střevnímu antigenu, či o kombinaci obou možností. Je však zřejmé, že zánět střevní sliznice u IBD je výsledkem kaskády dějů, které vznikly jako reakce na antigen, přičemž primární „chyba“ vzniká nejspíše při předkládání tohoto antigenu T-lymfocytům, kterého se účastní enterocyty a leukocyty jako antigen-prezentující buňky nebo jako zdroje cytokinů, chemokinů a dalších prozánětlivých působků [32].

Souběžně s narůstajícím rozsahem informací o imunopatologických pochodech u IBD vzniká otázka, do jaké míry lze různé imunologické laboratorní parametry využít k diagnostice, diferenciální diagnostice, monitorování průběhu a odhadu prognózy nemocí. V diagnostice IBD se v současné době uplatňují především endoskopické a zobrazovací metody a histologické vyšetření biopsických vzorků – tedy invazivní, časově i finančně nákladné metody [25,26,27,31]. Rutinně prováděná laboratorní vyšetření přispívají k diagnostice a k určení aktivity probíhajícího zánětu, avšak mnohdy mají omezenou senzitivitu a specifitu. Systémové zánětlivé markery (sérový C-reaktivní protein, další sérové proteiny akutní fáze, sedimentace erytrocytů, krevní obraz, sérové autoprotilátky) mohou mít normální hodnoty i v případě již probíhajícího zánětu střevní sliznice [19, 20, 23, 29].

Jedním z úkolů klinické laboratorní diagnostiky je proto nalezení neinvazivního, jednoduchého, časově i finančně dostupného vyšetření, které by pomohlo detekovat zánětlivé změny na střevní sliznici, odlišit funkční poruchy zažívacího ústrojí od organického poškození a upozornit na možnost relapsu u pacienta se známou diagnózou IBD.

Podle řady recentních studií by některé z výše vyjmenovaných vlastností mohl mít fekální kalprotektin [1,2,6,16,18].

Kalprotektin (synonyma: kalgranulin A/B, S100A8/S100A9, MRP8/14) je hlavní antigenní složkou cytoplazmy neutrofilních granulocytů. Jde o 36 kDa heterodimer, složený z lehkého a těžkého řetězce, patřící do rodiny S-100 proteinů vázajících vápník. Je produkován nejenom neutrofilními granulocyty, ale i monocyty/makrofágy a některými epitelu, a má významné antimikrobiální vlastnosti. Jako adhezín se účastní přestupu leukocytů z cirkulace do míst zánětu. Po aktivaci neutrofilů a adhezi monocytů k endotelu je uvolňován, působí bakteriostaticky a ovlivňuje lokální cytokinovou odpověď [3,8,30]. V posledních letech byla provedena řada studií, potvrzujících stabilitu uvolňovaného kalprotektinu ve stolici, což z něj činí vhodný marker pro rutinní laboratorní diagnostiku [5,7,9,10,14,15].

Do klinické laboratorní praxe v ČR se v posledním roce dostalo několik diagnostických souprav k detekci fekálního kalprotektinu. Jedná se t.č. výhradně o metody enzymové imunoanalýzy (sandwich ELISA), používající buď polyklonální, nebo monoklonální protilátky proti kalprotektinu. V literatuře je doposud málo informací o tom, do jaké míry jsou výstupy z různých souprav navzájem srovnatelné. Cílem této práce bylo proto srovnání dvou komerčně dostupných ELISA souprav k detekci fekálního kalprotektinu. U obou souprav jsme stanovili parametry variability měření (linearita, opakovatelnost, stabilita), senzitivitu a specifitu testů a provedli jsme srovnávací analýzu výsledků.

## Materiál a metodiky

### Soubor pacientů

Vyšetřili jsme vzorky stolice 61 nemocných, kteří absolvovali gastroenterologické vyšetření včetně kolonoskopie pro dolní dyspeptický syndrom, tj. pro bolesti břicha, průjemy, křeče v břiše a meteorismus. Soubor pacientů tvořilo 27 mužů a 34 žen ve věku 19 – 69 let (medián 38,4 roku). Na základě klinického vyšetření, kolonoskopie a dalších (zobrazovacích, histopatologických) vyšetření byla u 47 z vyšetřených osob stanovena diagnóza IBD (25 nemocných s Crohnovou nemocí a 22 nemocných s ulcerózní kolitidou), u 14 pacientů nebylo prokázáno zánětlivé střevní onemocnění.

Kontrolní skupinu tvořilo 98 zdravých osob, 50 mužů ( věk

noveno analýzou ROC křivek a srovnáno s výrobcí doporučeným referenčním rozmezím.

Technické parametry studovaných souprav uvádí tabulka 1.

### Statistická analýza

Statistická analýza dat byla provedena s pomocí softwaru Statistica CZ 8.0 (Statsoft, Tulsa, USA). U obou souprav byly stanoveny parametry variability měření – linearita, opakovatelnost a stabilita, diagnostická hodnota testů – jejich senzitivita a specificita pro diagnózu IBD, a nakonec bylo provedeno srovnání výsledků vyšetření provedených dvěma testy (Pearsonův korelační koeficient, Bland-Altmanova analýza) [4]. ROC analýza byla provedena pomocí kalkulátoru JROCFIT 1.0.2 [12].

Za statisticky významný výsledek byla brána *p*-hodnota menší nebo rovna 0,05.

**Tab. 1.** Charakteristika studovaných souprav

**Table 1.** Kit characteristics

	BÜHLMANN	R-BIOPHARM
Typ vzorku	lidská stolice	lidská stolice
Hmotnost vzorku	50-100 mg	50-100 mg
Objem eluátu pro analýzu	20 µl (1:50)	20 µl (1:50)
Imobilizovaná antigen vázající protilátka na mikrotitrační destičce	monoklonální protilátka rozeznávající unikátní epitop na MRP8/14 heterokomplexu v nevariabilním úseku molekuly (nikoliv však na podjednotkách MRP 8 a MRP 14)	polyklonální králičí protilátka proti šesti různým epitopům v nevariabilním úseku heterokomplexu molekuly kalprotektinu
Inkubační časy (min)		
- zhotovení eluátu	30'	45'
- konjugát	30'	45'
- substrát	15'	30'
Celková doba inkubace	75'	120'
Počet kalibrátorů	5	8
Konjugát	protilátka proti kalprotektinu konjugovaná s křenovou peroxidázou	protilátka proti kalprotektinu konjugovaná s křenovou peroxidázou
Substrát	tetramethylbenzidin (TMB)	tetramethylbenzidin (TMB)
Referenční rozmezí (výrobce)	< 50µg/g	< 50µg/g
Rozsah měření	10-600 µg/g	7,8 - 1000 µg/g
Vlnová délka spektrofotometru	450 nm	450 nm

16–66 let, medián 47,1 roku) a 48 žen (věk 17-63 let, medián 39,9 roku). Tyto osoby neměly akutní ani chronické zažívací obtíže, v rodinné ani osobní anamnéze nebyl údaj o výskytu IBD.

Provedení studie bylo schváleno Etickou komisí VFN v Praze.

### Laboratorní vyšetření

Studovali jsme ELISA soupravy Calprotectin ELISA (Bühlmann, Bazilej, Švýcarsko), ve které je použita monoklonální protilátka proti kalprotektinu, a PhiCal™ Calprotectin ELISA (R-Biopharm, Darmstadt, Německo) využívající polyklonální protilátky proti kalprotektinu. Vzorek stolice o hmotnosti 50-100 mg byl odebrán do speciálních odběrových zkumavek Faecal Sample Preparation Kit Roche, umožňujících přesné zhotovení eluátu.


Byly analyzovány eluáty stolice, naředěné v poměru 1:50 eluačním roztokem podle pokynů výrobců souprav. Při analýzách (realizovaných manuálně) bylo postupováno podle pokynů výrobců. Referenční rozmezí normálních hodnot bylo sta-

## Výsledky

### Linearita – diluční pokus

Linearita měření pomocí studovaných souprav byla hodnocena po naředění eluátu stolice se známou vysokou hodnotou fekálního kalprotektinu vzorkem neobsahujícím kalprotektin v rozmezí od 0 % do 100 % v krocích po 10 %, neboli od poměru 1:9 po 9:1. Každý vzorek se měřil v duplikátu. Pořadí měření jednotlivých vzorků bylo randomizované.

U obou souprav byly zjištěny dobré parametry linearity měření, u soupravy firmy R-Biopharm však nebyl uspokojivý tvar křivky u vysokých koncentrací – obrázek 1.

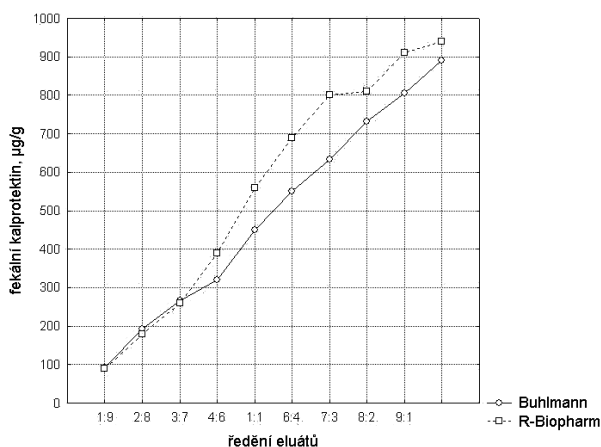

**Obr. 1.** Linearita měření. Dilučním testem byla ověřena platnost rozsahu linearity měření. Tento rozsah vymezuje interval, v němž lze bezpečně očekávat, že platí výrobcí deklarované a validačními experimenty ověřené hodnoty přesnosti a vychýlení metody. Jelikož nejsou k dispozici komerčně dostupné referenční materiály, byl k posouzení linearity měření použit diluční pokus

Při validaci byla vyhodnocena výtěžnost dosažená u jednotlivých vzorků (R %) podle vzorce  $R = (\text{výsledek měření}/\text{teoretická hodnota}) \times 100$  s hodnotou  $R = 93 \%$  pro soupravu Bühlmann a  $R = 86 \%$  pro soupravu R-Biopharm.

**Fig. 1.** Measurement linearity. The dilution assay was used to test the validity of the measurement linearity range. Within this range, the method accuracy and deviation, as declared by the manufacturer and experimentally validated, should be guaranteed. As no commercially available reference was provided, the dilution assay was used to test the measurement linearity.

Within the validation, the method efficiency was calculated for individual samples (R %) according to the formula:  $R = (\text{measurement result}/\text{theoretical value}) \times 100$ . R was 93 % for the Bühlmann kit and 86 % for the R-Biopharm kit

**Tab. 2.** Přesnost stanovení fekálního kalprotektinu při použití dvou srovnávaných metod. Míra shodnosti výsledků testů je vyjádřena hodnotami variačního koeficientu opakovatelnosti (tj. jedna metoda, jeden operátor, jedna laboratoř)

- (a) intra-assay opakovatelnost  
(b) inter-assay opakovatelnost

**Table 2.** Accuracy of fecal calprotectin detection. The level of agreement of the results was expressed by the repeatability coefficient of variation (i.e. one method, one operator, one laboratory)

- (a) intra-assay repeatability  
(b) inter-assay repeatability

(a)

CV (%)	PK	NK
Bühlmann	6,6 %	5,4 %
R-Biopharm	4,1%	6,9 %

CV – variační koeficient  
PK – pozitivní vzorek  
NK – negativní vzorek

rotitrační destičky. U obou souprav byly variační koeficienty měření vysokého i nízkého vzorku nižší než 10% - viz tabulka 2a.

Dále jsme připravili 8 alikvot jednoho vzorku s vysokou a jednoho vzorku s nízkou koncentrací kalprotektinu, které jsme zamrazili při teplotě -20°C. Alikvoty jsme postupně rozmrazovali a v období od listopadu 2007 do března 2008 postupně stanovovali koncentrace kalprotektinu. Vzorky nebyly opakovaně rozmrazovány a zamrazovány. Variační koeficienty měření opět u obou souprav nepřevýšily hodnotu 10% - viz tabulka 2b.

### Srovnání metod

Pro sledování závislosti mezi dvěma soubory měření byl použit výběrový korelační koeficient. Vypočtená hodnota  $r = 0,83$  pro  $n = 159$ ,  $\alpha = 0,05$  a kritickou hodnotu  $r_k$  z tabulek = 0,197 svědčí pro signifikantní závislost.

Jak známo, korelační koeficient posuzuje míru závislosti mezi metodami, není kritériem pro posouzení shody výsledků [4]. Provedli jsme proto Bland-Altmanovu analýzu získaných dat. Rozdílový graf podle Blanda a Altmana uvádí na ose X průměr hodnot získaných dvěma srovnávanými metodami a na ose Y rozdíl hodnot získaných studovanými metodami. Obrázek 2a uvádí data bez transformace – vyplývá z něj heteroskedasticita naměřených hodnot (s rostoucí koncentrací rostou difference naměřených hodnot). Po logaritmické transformaci dat (obrázek 2b) jsou patrné limitní difference metod v rozmezí -17% až 30%.

(b)

CV (%)	PK	NK
Bühlmann	9,3 %	1,7 %
R-Biopharm	8,9 %	3,6 %

CV – coefficient of variation  
PK – positive specimen  
NK – negative specimen


*Variace v rámci testu a mezi testy (intra-assay a inter-assay charakteristiky)*

Vyšetřili jsme 15 alikvot jednoho vzorku s vysokou a jednoho vzorku s nízkou koncentrací kalprotektinu v jeden den na různých pozicích mik-

*Senzitivita a specificita*

Pro obě studované imunoanalytické metody byly vypočteny hodnoty senzitivity a specificity testů pro diagnózu IBD.

Nejdříve jsme pomocí on-line kalkulatoru para-

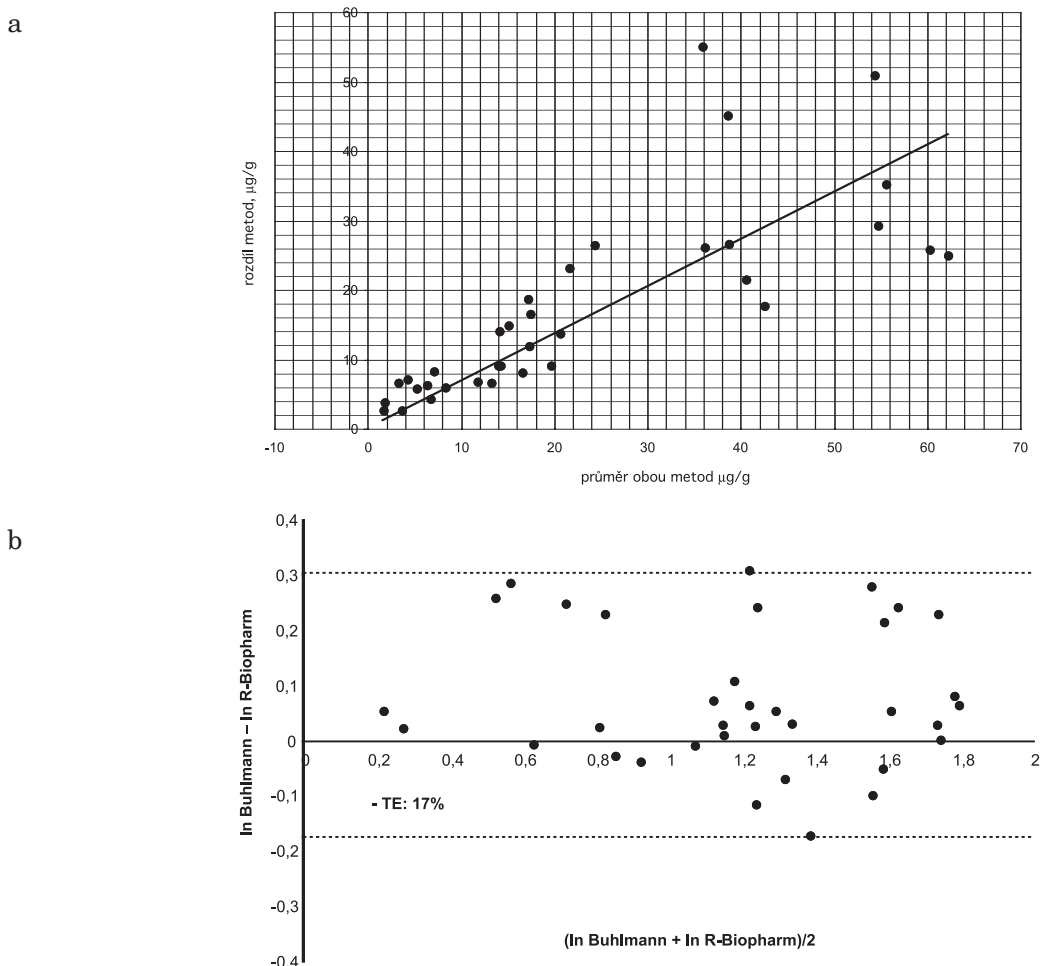

**Obr. 2.** Shoda výsledků měření pomocí dvou studovaných souprav  
(a) Rozdílový Bland-Altmanův graf, (b) Bland-Altmanův graf po logaritmické transformaci dat

**Fig. 2.** Congruence of measurement results  
(a) Bland-Altman plot for variation, (b) Bland-Altman plot for log-transformed data

metrů ROC křivek pro obě metody vypočetli hodnotu plochy pod křivkou: u soupravy Bühlmann byla plocha pod křivkou (ROC Area) 0,989 a u soupravy R-Biopharm 0,980. Tyto hodnoty se statisticky významně navzájem nelišily. Rovněž tak optimální cut-off bod (s nejvyšší senzitivitou a specificitou testu) byl pro obě soupravy podobný a nepatrně vyšší než cut-off hodnota udávaná výrobcem: 70 µg/g proti doporučeným 50 µg/g. Diagnostická senzitivita a specificita obou testů je uvedena v tabulce 3.

## Diskuse

Výskyt IBD v naší zemi neustále stoupá. Incidence ulcerózní kolitidy je odhadována na 8-12 na 100 000 obyvatel, incidence Crohnovy nemoci na 6-8 na 1 000 000 obyvatel. Obě nemoci postihují především osoby v produktivním věku a přes obrovské pokroky v diagnostice a léčbě se nepodařilo významně ovlivnit průběh těchto chorob, spočívajících

**Tab. 3.** Senzitivita a specificita studovaných ELISA testů pro diagnózu IBD (cut-off bod 70 µg/g)

**Table 3.** Sensitivity and specificity of ELISA kits for the diagnosis of IBD (cut-off point: 70 µg/g)

	Senzitivita	Specificita
Bühlmann	79 %	87 %
R-Biopharm	74 %	84 %

cí v opakovaných relapsech aktivity a nutnosti chirurgické léčby. Relapsy a komplikace IBD pacienty významně invalidizují, diagnostická a léčebná péče o ně je velmi nákladná. S přihlédnutím k ekonomické náročnosti diagnostických a léčebných postupů, které představuje především biologická léčba IBD, by zavedení jednoduché a neinvazivní diagnostické metody identifikace pacientů s aktivním zánětem stěvy mohlo mít významné preventivní dopady a umožnilo by posoudit časnou odpověď na podávanou léčbu.

V této souvislosti je v centru zájmu gastroenterologů a laboratoří vyšetřujících nemocné s IBD

mimo jiného stanovení fekálního kalprotektinu. K nejrecentnějším zjištěním zahraničních autorů patří dobrá korelace hodnot fekálního kalprotektinu se stupněm postižení střeva ulcerózní kolitidou stanoveným podle Sutherlandových kritérií ( $r = 0,866$ ) [34] nebo vynikající senzitivita (téměř 100%) a nižší specifita (67 – 80 %) u dětí s různými IBD [13,22,24]. Von Roonova kvantitativní meta-analýza prospektivních studií [33] poukazuje mj. na vyšší stupeň přesnosti vyšetření fekálního kalprotektinu při vyšší než běžně doporučované cut-off hodnotě tohoto analytu. V meta-analýze Lashnera et al. [21] bylo v databázích Medline, Ovid, Embase a Cochrane nalezeno na 30 klinických studiích, v rámci kterých byl vyšetřen kalprotektin ve stolici u více než 6000 osob. U nemocných s IBD byl medián koncentrace kalprotektinu v séru 219,23  $\mu\text{g/g}$  (95% interval spolehlivosti 174,5 – 263,9), což bylo signifikantně více než medián hodnot zdravých osob ( $p < 0,001$ ).

V naší studii jsme prokázali dobré parametry přesnosti stanovení u obou studovaných ELISA souprav (intra- a inter-assay  $< 10\%$ ). Dilučním testem linearity byly prokázány lepší hodnoty u soupravy používající monoklonální protilátku, a to zejména u vysokých koncentrací kalprotektinu. Výsledky získané dvěma metodami navzájem uspokojivě korelovaly: Pearsonův korelační koeficient  $r = 0,83$ , limitní difference podle Blanda-Altmana –17% až 30%. Diagnostická senzitivita testů byla 79 % pro soupravu Calprotectin ELISA Bühlmann a 74 % pro soupravu Calprotectin ELISA R-Biopharm, specifita 87 % pro soupravu Calprotectin ELISA Bühlmann a 84 % pro soupravu Calprotectin ELISA R-Biopharm. Obě studované soupravy tedy měly dobré a srovnatelné parametry měření, příznivější hodnoty vykázala souprava využívající monoklonální protilátku proti kalprotektinu.

Při posuzování imunoanalytických metod stanovení kalprotektinu ve stolici je třeba vzít v úvahu, že kalprotektin je organická makromolekula, která je do určité míry variabilní a která se navíc vyskytuje v heterokomplexech (především v dimerech) [11,17]. Formátem obou studovaných diagnostických souprav je sendvičová enzymová imunoanalýza se dvěma protilátkami cílenými proti různým epitopům kalprotektinu. U soupravy firmy Bühlmann je podle informací výrobce na mikrotitrační destičce imobilizována monoklonální protilátka rozeznávající unikátní epitop na heterokomplexu molekuly kalprotektinu v nevariabilním úseku molekuly, přičemž tento epitop není imunogenní na samostatných podjednotkách molekuly (tj. MRP 8 a MRP 14). Tím je na minimum redukován vliv variabilního složení molekuly kalprotektinu na výsledky sta-

novení. Souprava firmy R-Biopharm využívá polyklonální králičí protilátku proti šesti různým epitopům v nevariabilním úseku heterokomplexu molekuly kalprotektinu, čímž je zajištěna minimalizace výskytu falešně negativních výsledků. Je potěšitelnou skutečností, že studované komerčně dostupné metody mezi sebou uspokojivě korelují, a tudíž není naléhavě nutné zavedení referenčních kalibrátorů. Je nicméně zřejmé, že zavedením referenčních materiálů lze zdokonalit korelaci komerčně dostupných metod [28]. Vystane-li potřeba deklarovat některou z dostupných metod jako neformální “zlatý standard”, přikláníme se k enzymové imunoanalýze s využitím monoklonálních protilátek, a to z důvodu lepších parametrů variability, jakož i senzitivity a specifity. Ačkoliv by výběr takové metody mohl přispět ke zlepšení reprodukovatelnosti mezi metodami, otázkou je, jak by takovou volbu vnímali výrobci konkurenčních souprav a jaká by byla ochota výrobce “zlatého standardu” odkrýt část důvěrných know-how informací.

Vyšetření stolice je zcela neinvazivním přístupem. Ve srovnání s obvyklými imunoanalytickými metodami vyšetření krve však analýza fekálních vzorků vyžaduje ještě větší pečlivost v preanalytické fázi vyšetření, při které hrozí zvýšené riziko preanalytické chyby – odběrem stolice počínaje, přes správné uchování primárního vzorku až po přesné zhotovení eluátu. Na rozdíl od jiných biologických materiálů ovlivňuje složení vzorku stolice např. relativní poměr pevných a tekutých složek, který má vliv na nutné konstantní množství stolice pro testování, což rovněž může způsobit analytické chyby.

Závěrem konstatujeme, že obě studované ELISA soupravy k detekci fekálního kalprotektinu jsou dostatečně robustní, mají dobré a srovnatelné parametry měření. Dostupnost, citlivost a výkonnost ELISA testů fekálního kalprotektinu lze (s vědomím specifik fekálních vzorků) dobře využít v klinické praxi.

## Literatura

1. **Aadland, E., Fagerhol, M.K.** Faecal calprotectin: a marker of inflammation throughout the intestinal tract. *Eur J Gastroenterol Hepatol.* 2002, 14, 823-825.
2. **Amati, L., Passeri, M.E., Selicato, F.** New insights into the biological and clinical significance of fecal calprotectin in inflammatory bowel disease. *Immunopharmacol Immunotoxicol* 2006, 28, 665-681.
3. **Berni Canani, R., Terrin, G., Rapacciuolo, L.** Faecal calprotectin as reliable non-invasive marker to assess the severity of mucosal inflammation in children with inflammatory bowel disease. *Dig Liver Dis* 2008, 40(7), 547-53.

4. **Bland, J.M., Altman, D.G.** Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *Lancet* 1986, 1(8476), 307-310.
5. **Bremner, A., Roked, S., Robinson, R. et al.** Faecal calprotectin in children with chronic gastrointestinal symptoms. *Acta Paediatr* 2005, 94, 1855-1858.
6. **Bunn, S.K., Bisset, W.M., Main, M.J.** Faecal calprotectin as a measure of disease activity in childhood inflammatory bowel disease. *Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2001, 32, 171-177.
7. **Carroccio, A., Iacono, G., Cottone, M. et al.** Diagnostic accuracy of fecal calprotectin assay in distinguishing organic causes of chronic diarrhea from irritable bowel syndrome: a prospective study in adults and children. *Clin Chem* 2003, 49, 861-867.
8. **Costa, F., Mumolo, M.G., Bellini, M. et al.** Role of faecal calprotectin as non-invasive marker of intestinal inflammation. *Dig Liver Dis* 2003, 35, 642-647.
9. **Costa, F., Mumolo, M.G., Ceccarelli, L. et al.** Calprotectin is a stronger predictive marker of relapse in ulcerative colitis than in Crohn's disease. *Gut* 2005, 54, 364-368.
10. **De Jong, N.S., Leach, S.T., Day, A.S.** Faecal S100A12: a novel noninvasive marker in children with Crohn's disease. *Inflamm Bowel Dis* 2006, 12, 566-572.
11. **D'Inca, R., Dal Pont, E., Di Leo, V. et al.** Calprotectin and lactoferrin in the assessment of intestinal inflammation and organic disease. *Int J Colorectal Dis* 2007, 22, 429-437.
12. **Eng, J.** Receiver operating characteristic analysis: a primer. *Acad Radiol* 2005, 12(7), 909-916.
13. **Fagerberg, U.L., Loof, L., Lindholm, J.** Faecal calprotectin: a quantitative marker of colonic inflammation in children with inflammatory bowel disease. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2007, 45, 414-420.
14. **Fagerberg, U.L., Loof, L., Merzoug, R.D. et al.** Faecal calprotectin levels in healthy children studied with an improved assay. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2003, 37, 468-472.
15. **Fagerberg, U.L., Loof, L., Myrdal, U.** Colorectal inflammation is well predicted by fecal calprotectin in children with gastrointestinal symptoms. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2005, 40, 450-455.
16. **Fagerhol, M.K.** Calprotectin, a faecal marker of organic gastrointestinal abnormality. *Lancet* 2000, 356, 1783-1784.
17. **Johnson, M.W., Maestranzi, S., Duffy, A.M. et al.** Faecal calprotectin: a noninvasive diagnostic tool and marker of severity in pouchitis. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2008, 20, 174-179.
18. **Kaiser, T., Langhorst, J., Wittkowski, H.** Faecal S100A12 as a non-invasive marker distinguishing inflammatory bowel disease from irritable bowel syndrome. *Gut* 2007, 56, 1706-1713.
19. **Langhorst, J., Elsenbruch, S., Koelzer, J. et al.** Noninvasive markers in the assessment of intestinal inflammation in inflammatory bowel diseases: performance of fecal lactoferrin, calprotectin, and PMN-elastase, CRP, and clinical indices. *Am J Gastroenterol* 2008, 103, 162-169.
20. **Langhorst, J., Elsenbruch, S., Mueller, T. et al.** Comparison of 4 neutrophil-derived proteins in feces as indicators of disease activity in ulcerative colitis. *Inflamm Bowel Dis* 2005, 11, 1085-1091.
21. **Lashner, B.A.** How useful is fecal calprotectin for the diagnosis of IBD and colorectal cancer? *Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol* 2008, 5, 16-17.
22. **Leach, S.T., Yang, Z., Messina, I. et al.** Serum and mucosal S100 proteins, calprotectin (S100A8/S100A9) and S100A12, are elevated at diagnosis in children with inflammatory bowel disease. *Scand J Gastroenterol* 2007, 42, 1321-1331.
23. **Lundberg, J.O., Hellstrom, P., Fagerhol M.K. et al.** Technology insight: calprotectin, lactoferrin and nitric oxide as novel markers of inflammatory bowel disease. *Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol* 2005, 2, 96-102.
24. **Olafsdottir, E., Aksnes, L., Fluge, G. et al.** Faecal calprotectin levels in infants with infantile colic, healthy infants, children with inflammatory bowel disease, children with recurrent abdominal pain and healthy children. *Acta Paediatr* 2002, 91, 45-50.
25. **Pardi, D.S., Sandborn, W.J.** Predicting relapse in patients with inflammatory bowel disease: what is the role of biomarkers? *Gut* 2005, 54, 321-322.
26. **Parry, S., Forgacs, I.** Intestinal infection and irritable bowel syndrome. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2005, 17, 5-9.
27. **Roseth, A.G., Aadland, E., Jahnsen, J. et al.** Assessment of disease activity in ulcerative colitis by faecal calprotectin, a novel granulocyte marker protein. *Digestion* 1997, 58, 176-180.
28. **Schoepfer, A.M., Trummler, M., Seeholzer, P. et al.** Accuracy of four fecal assays in the diagnosis of colitis. *Dis Colon Rectum* 2007, 50, 1697-1706.
29. **Schoepfer, A.M., Trummler, M., Seeholzer, P. et al.** Discriminating IBD from IBS: comparison of the test performance of fecal markers, blood leukocytes, CRP, and IBD antibodies. *Inflamm Bowel Dis* 2008, 14, 32-39.
30. **Summerton, C.B., Longlands, M.G., Wiener, K.** Faecal calprotectin: a marker of inflammation throughout the intestinal tract. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2002, 14, 841-845.
31. **Tibble, J., Teahon, K., Thjodleifsson, B. et al.** A simple method for assessing intestinal inflammation in Crohn's disease. *Gut* 2000, 47, 506-513.
32. **Vermeire, S., Van Assche, G., Rutgeerts, P.** Laboratory markers in IBD: useful, magic, or unnecessary toys? *Gut* 2006, 55, 426-431.
33. **Von Roon, A.C., Karamountzos, L., Purkayastha, S., Reese, G.E., Darzi, A.W. et al.** Diagnostic precision of fecal calprotectin for inflammatory bowel disease and colorectal malignancy. *Am J Gastroenterol* 2007, 102(4), 803-813.
34. **Xiang, J.Y., Ouyang, Q., Li, G.D.** Clinical value of fecal calprotectin in determining disease activity of ulcerative colitis. *World J Gastroenterol* 2008, 14, 53-57.

### Poděkování

*Tato práce byla podpořena grantem IGA MZd ČR č. NR/9094-4/2006.*

*Do redakce došlo 23. 7. 2008*

*MUDr. Karin Malíčková  
Klinická imunologie a alergologie, ÚKBLD VFN a LF UK  
Karlovo nám. 32  
121 11 Praha 2  
e-mail: kmali@lf1.cuni.cz*